

medivon.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Masażer do ciała

Instrukcja użytkowania

Po włożeniu wtyczki do gniazdka zaświeci się lampka zasilania.

Obróć przełącznik zasilania / pokrętko prędkości w prawo, aby rozpocząć masaż wibracyjny i wyreguluj intensywność wibracji. Obróć go w lewo, aby zmniejszyć intensywność lub wyłączyć zasilanie.

Odłącz masażer od zasilania po użyciu lub gdy nie jest używany przez dłuższą chwilę.

UWAGA!

Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś w ciąży lub cierpisz na problemy z sercem lub jakiegokolwiek obrażenia fizyczne. Jeśli nie masz pewności, przed użyciem skontaktuj się z lekarzem.

Przed użyciem odczekaj godzinę od ostatniego posiłku.

Trzymaj masażer z dala od dzieci - to nie jest zabawka!

Nie używaj urządzenia na tym samym obszarze ciała dłużej niż 15 minut podczas jednej sesji masażu.

Nie używaj urządzenia w łazience ani w miejscach wilgotnych.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się serwisem.

Nie używaj urządzenia, gdy źle się czujesz.

Przed wymianą głowicy, upewnij się, że urządzenie przestało działać.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie próbuj uruchomić urządzenia.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia życia lub zdrowia.

Przechowywanie i konserwacja

Aby wyczyścić masażer, używaj do tego celu wyłącznie miękkiej szmatki i neutralnego detergentu.

Do urządzenia nie może dostać się woda ani żadna ciecz.

Masażer trzymaj w suchym miejscu po jego użyciu, unikaj wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego i gazów które mogą powodować korozję. Zawsze odłączaj urządzenie z zasilania, jeśli nie jest używane.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.



Armare S.A. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z Europejską dyrektywą RE 2014/35/EU. Pełny tekst Deklaracji Zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.medi-von.pl/deklaracje




Przeczytaj tę sekcję, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego i bezpiecznego korzystania z naszego masażera przed użyciem. Jest to małe przypomnienie jak prawidłowo używać urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub szkody dla kogokolwiek. Po przeczytaniu prosimy o odłożenie instrukcji w bezpieczne miejsce, aby w każdej chwili można było ją sprawdzić.



Opis części masażera



Końcówki masujące do wyboru

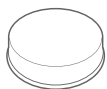

Łaska głowica



Falująca głowica



Głowica piłeczkowa



Głowica Tai chi




Szorstka głowica




Rolkowa głowica



Gładka rolkowa
głowica

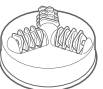


Głowica z rolką
kątową

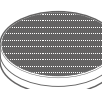


Oslona z siatki


Jak używać naszego masażera ?

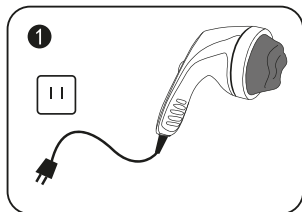


Zanim wymienisz głowicę masującą, pamiętaj, aby odłączyć zasilanie

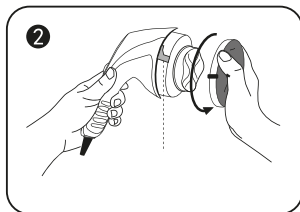


Przytrzymaj urządzenie obiema rękami, a następnie przekręć osłonkę z siatką ochronną do wewnątrz - odkręcając ją.

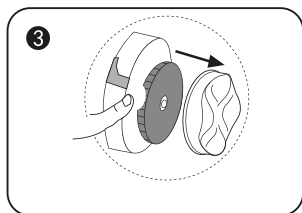


Znajdź dwie szczeliny pomiędzy głowicą i masażerem. Następnie przy pomocy palców zdejmij głowicę dociskając w tych miejscach

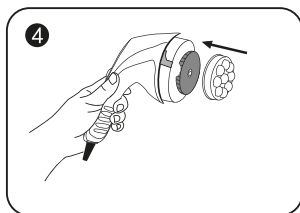

Wybierz ulubioną głowicę masującą, a następnie dociśnij ją do masażera analogicznie jak w poprzednim kroku.

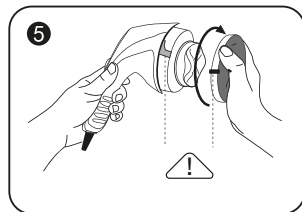

Zamocuj ponownie osłonkę głowicy zwracając uwagę na miejsce zaczerwone obu elementów

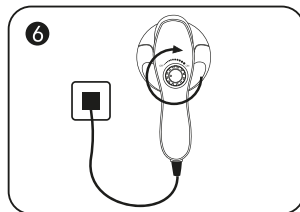

Podłącz urządzenie do zasilania, a następnie uruchomi masażer pokrętletem

Zastosowanie poszczególnych głowic masujących

1. **Płaska głowica masująca:** masaż dekompresyjny, masaż odchudzający na twarz, brzuch
2. **Falująca głowica masująca:** punkty akupunktury i masaż tkanek głębokich
3. **Głowica do masażu piłeczkowego:** może być używana z olejkiem eterycznym według uznania
4. **Głowica masująca Tai Chi:** imitacja tai chi, ugniatanie falujące
5. **Szorstka głowica masująca:** usuwa suchą skórę stóp.
(Uwaga: nie używaj osłony z siatki, gdy przymocowana jest szorstka głowica)
6. **Rolkowa głowica masująca:** duży obszar gładkiego masażu rolującego
7. **Gładka rolkowa głowica masująca:** 3 gładkie rolki masujące do masażu rolująco-ugniatającego.
8. **Głowica masująca z rolką kątową:** aktywność monolityczna oraz masaż shiatsu
(Uwaga: nie używaj osłony z siatki, gdy głowica kąтова jest przymocowana)
9. **Oslona z siatki:** zapobiega wciąganiu włosów i wiszących elementów do silnika urządzenia. Pamiętaj aby zachować ostrożność!